



Preguntas frecuentes

Biomet® OrthoPak®

Estimulador del crecimiento
óseo no invasivo



*Impulsado por tecnología de
acoplamiento capacitivo*



Acerca De

¿Por qué se recetan estimuladores del crecimiento óseo?


Los médicos pueden recetar un estimulador del crecimiento óseo para ayudar en el proceso de consolidación ósea. El estimulador del crecimiento óseo no invasivo Biomet® OrthoPak® es un dispositivo de tratamiento no quirúrgico, clínicamente probado y despejada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), prescrito por médicos durante más de 35 años para ayudar en la consolidación de las fracturas por pseudoartrosis.

¿Cómo funciona el dispositivo OrthoPak®?

Los electrodos Soft-Touch® que acompañan al estimulador OrthoPak® se colocan a cada lado del sitio de tratamiento; a 180 grados de distancia entre sí. Los electrodos Soft-Touch® ofrecen una tecnología de estimulación segura y científicamente probada llamada acoplamiento capacitivo. La zona que rodea los electrodos se estimula así induciendo los mecanismos naturales de cicatrización del cuerpo para promover de manera segura y eficaz el crecimiento óseo en el lugar de tratamiento objetivo.

¿Cómo pueden los pacientes confirmar que el dispositivo está funcionando?

Cuando el dispositivo está correctamente activado, la marca de verificación parpadeante en la pantalla del controlador indica que el tratamiento está en curso. Si el sistema no está correctamente activado o los componentes del sistema se desconectan accidentalmente, una alerta audible y visual indicará al paciente que el dispositivo no está funcionando correctamente.

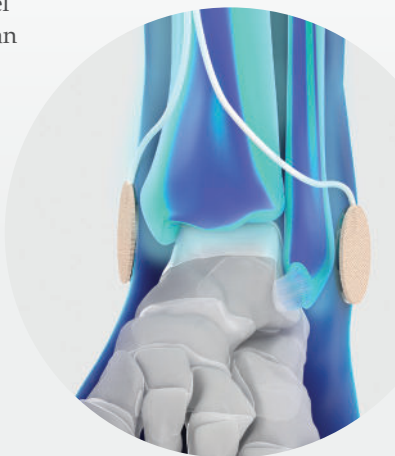

Uso

¿Cuánto tiempo se lleva puesto el dispositivo OrthoPak®?

El dispositivo OrthoPak® es un dispositivo de tratamiento no quirúrgico exclusivo, que puede utilizarse de forma continua todos los días después de la cirugía para ayudar a promover el proceso de recuperación y consolidación. El médico que prescribe determinará un tratamiento personalizado para el paciente, lo que incluye cuándo interrumpir el tratamiento.

¿Puede el dispositivo OrthoPak® ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia?

Los efectos del tratamiento de estimulación no se han estudiado durante el embarazo o la lactancia, por lo que se debe consultar al médico que prescribe antes de su uso.

¿Se puede usar el dispositivo OrthoPak® con un marcapasos?

El uso del dispositivo OrthoPak® y de un marcapasos o cardioversor puede evaluarse de forma individual. El dispositivo OrthoPak® no está contraindicado para pacientes con marcapasos; sin embargo, se recomienda que un cardiólogo evalúe cualquier posible interacción antes de su uso.

¿Con qué frecuencia es necesario reemplazar los paquetes de la batería?

Las baterías duran aproximadamente 24 horas. Se recomienda cambiar la batería diariamente.

¿Con qué frecuencia se deben reemplazar los electrodos?

Los electrodos Soft-Touch® desechables están diseñados para ser reemplazados tranquilamente en un plazo de 1 a 7 días. Con el uso continuo, el hidrogel de los electrodos puede secarse. Los electrodos pueden renovarse humedeciendo el área de gel del electrodo o pueden pedirse electrodos de repuesto.

Cuidado

¿Cómo se pueden pedir suministros adicionales?

Los suministros adicionales, incluidos los electrodos Soft-Touch® y los parches de cubierta opcionales, pueden solicitarse sin cargo llamando al equipo de Atención al cliente de EBI® al (800) 526-2579.

¿Se puede usar el dispositivo OrthoPak® mientras se viaja?

Sí. El dispositivo OrthoPak® es cómodo y discreto, y puede usarlo mientras viaja para continuar con el tratamiento terapéutico mientras está en marcha. Si viaja con el estimulador OrthoPak® en avión, se recomienda quitarse el dispositivo antes de pasar por el control de seguridad en el aeropuerto y llevar el Manual del paciente con el dispositivo en todo momento.

¿Qué sucede con el dispositivo cuando se completa el tratamiento?

Una vez que el médico que prescribe haya determinado la finalización del tratamiento, el dispositivo puede desecharse de acuerdo con las ordenanzas locales vigentes. También puede comunicarse con el equipo de Atención al cliente de EBI® llamando al (800) 526-2579 para obtener ayuda con la eliminación del dispositivo.

¿Cómo se debe almacenar y limpiar el dispositivo OrthoPak®?

Cuando no esté en uso, el dispositivo OrthoPak® debe guardarse en un lugar fresco y seco. Se puede usar un paño húmedo para limpiar el dispositivo. No se deben usar productos de limpieza ni detergentes.

¿A quién llaman los pacientes si tienen preguntas o inquietudes adicionales sobre el producto?

Los pacientes pueden llamar al equipo de Atención al cliente de EBI® al (800) 526-2579.

Cobertura

¿El dispositivo OrthoPak® está cubierto por el seguro?

Cada paciente tiene una póliza de cobertura de seguro diferente. El dispositivo OrthoPak® está cubierto por Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de atención médica comerciales, junto con la indemnización laboral.

¿Es necesario autorizar previamente el dispositivo OrthoPak®?

Si se requiere autorización previa, un representante de EBI® verificará la elegibilidad del paciente y los niveles de beneficios para obtener una autorización previa avanzada antes de que el paciente reciba el dispositivo.

¿Se proporcionan opciones de apoyo adicional a los pacientes con inquietudes financieras?

Sí. Está disponible un grupo dedicado de defensa del paciente de EBI® para ayudar a todos los pacientes del OrthoPak® que tengan inquietudes financieras. El paciente puede llamar al grupo de defensa del paciente de EBI® directamente al (888) 236-3652.



Líder del sector en estimulación del crecimiento óseo

Como pionero en la estimulación del crecimiento óseo, EBI ha liderado el sector durante casi medio siglo con la cartera más grande de soluciones probadas clínicamente y se dedica a avanzar en su misión de ayudar a las personas a sanar para recuperar sus vidas diarias.

EBI, LLC

1 Gatehall Drive, Suite 303
Parsippany, NJ 07054
(800) 526-2579



Fabricante legal

EBI Patient Care, Inc.
484 Calle E
Guaynabo, PR 00969 EE. UU.

Puede encontrar la información de prescripción completa, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas asociadas con el uso de estos dispositivos, en línea en ebibonestimulator.com o llamando al 800-526-2579. Todo el contenido aquí incluido está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, según corresponda, propiedad de EBI o con licencia otorgada a EBI o a sus filiales, a menos que se indique lo contrario y está prohibida su redistribución, duplicación y divulgación total o parcial sin el consentimiento expreso por escrito de EBI. El estimulador OrthoPak® está indicado para el tratamiento de una pseudoartrosis establecida adquirida con carácter secundario a un traumatismo, excluidas las vértebras y todos los huesos planos, donde el ancho del defecto de la pseudoartrosis sea inferior a la mitad del ancho del hueso que se va a tratar. Está contraindicado si la persona tiene pseudoartrosis sinovial. La legislación federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa. Solo con receta. Para uso en un solo paciente. No reutilizar. EB00208_ES REV A 07/26. ©2026 EBI, LLC. Todos los derechos reservados.



Aprender más
ebibonestimulator.com

